

THERAGUN

Wave Duo


User manual/Інструкція користувача

Wave Duo™

Розумний вібруючий масажний валик від творців Theragun.

- А Світлодіодний індикатор батареї
- В Світлодіодний індикатор швидкості
- С Зарядний порт USB-C

Для того, щоб ознайомитися з важливими інструкціями щодо техніки безпеки, див. вкладку «Попередження»

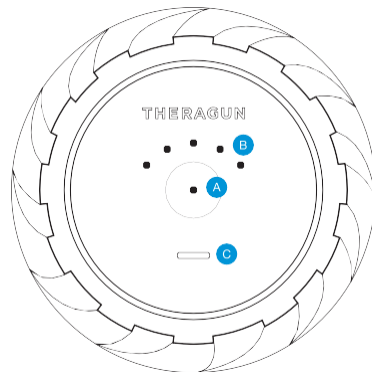

Використання Wave Duo

1. Для того, щоб увімкнути Wave Duo, затисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 1 – 2 секунд.
2. Натисніть головну кнопку, щоб збільшити швидкість. Після досягнення максимальної швидкості при повторному натисканні кнопки Wave Duo повернеться до мінімальної швидкості.
3. Розмістіть пристрій на ділянці, яку плануєте опрацьовувати, поступово застосовуючи від легкого до помірного тиску за потреби.
4. Для того, щоб вимкнути Wave Duo, затисніть та утримуйте кнопку живлення, поки пристрій не вимкнеться.

Smart-характеристики

Wave Duo — це smart-пристрій з підтримкою Bluetooth, розроблений для безперешкодної роботи з додатком Therabody. Після завантаження додатку ви пройдете покрокове налаштування та дізнаєтеся, як підключити ваш пристрій.



Скануйте QR-код для початку роботи



Зарядження Wave Duo

1. Wave Duo підтримує зарядження через USB-C. Для зарядження підключіть кабель до вашого USB-адаптера.
2. Світлодіодний індикатор на кнопці живлення буде блимати до повного зарядження.
3. Зарядка закінчена, якщо світлодіодний індикатор на кнопці живлення горить зеленим кольором.
4. Рівень заряду батареї відображається на світлодіодному індикаторі кнопки живлення постійно, коли пристрій увімкнено. Для того, щоб побачити рівень заряду батареї на вимкненому пристрої. Коротко натисніть на кнопку живлення, світлодіодний індикатор заблимає, показуючи рівень заряду батареї.

Не використовуйте очисники на спиртовій основі.

THERAGUN

by Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.



@Therabody